



# DÉMAQUILLANT À TÊTE NOIRE

CC-9098

## Manuel de l'Utilisateur

Merci pour votre achat récent de notre produit.  
Lisez attentivement les instructions avant d'utiliser le produit.  
Les résultats peuvent varier en fonction de la préparation appropriée des pores.

### INTRODUCTION DU PRODUIT

Dispositif d'aspiration de vide de dissolvant de point noir pour enlever rapidement l'épiderme externe et la graisse non désirée de peau, accumulation résiduelle de saleté, et enlèvement modéré de kératine morte de peau.

### PRÉPARATION FACE


1. Trouvez un nettoyant qui convient le mieux à votre type de peau. Un lavage crémeux fonctionne bien pour la peau sèche ou sensible. Considérez une formule de gel pour la peau combinée ou grasse. visage
2. Wet your avec l'eau chaude (pas froide ou chaude).
3. Apply le nettoyant dans les mouvements circulaires doux. Massez dans votre peau pendant environ une minute sans frotter.
4. Rincer soigneusement à l'eau chaude. Vous pouvez également essuyer doucement le nettoyant avec une débarbouillette chaude pour une sensation de nettoyage supplémentaire.
5. Soak un chiffon dans chaud à chaud {pas être mais assez chaud pour pouvoir toujours toucher} l'eau et tordre dehors l'excès d'eau.
6. Hold tissu sur le visage à la vapeur sur les pores jusqu'à ce que le tissu refroidit. Répétez 3x-4x.
7. Pat (ne frottez pas) votre visage sec.

### PARAMÈTRES DU PRODUIT


Nom	Dissolvant de points noirs
Capacité de la batterie	500 mAh
Temps de travail	≥ 120 minutes
Temps de chargement	environ 2 heures
standard	GB4706.59-2008
Tension de taux	5V (5V)
Puissance de taux	1.6W (1.6W)
Taux actuel	450 mA

### INSTRUCTIONS

Le produit est mieux utilisé après les instructions appropriées de préparation du visage.

1. Choisissez la pointe d'aspiration aux besoins désirés.
2. Light appuyez sur le bouton d'alimentation pour démarrer, puis appuyez sur la sélection de l'équipement, un total de trois vitesses.
3. Turn sur la valeur par défaut est esse moyenne (II) (peau neutre). puis appuyez sur le bouton d'alimentation pour passer à la vitesse supérieure (I) (peau sèche): appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation pour passer à faible gear (III) (peau grasse). de peau (faible, moyen et élevé). Spot test sur le bras ou la main pour tester la force avant d'appliquer sur le visage. bouton d'alimentation
4. Hold down pendant 3 secondes pour arrêter l'appareil. l'indicateur
5. Electricity clignote  lors de la charge, et reste allumé lorsqu'il est plein.

### FONCTIONS

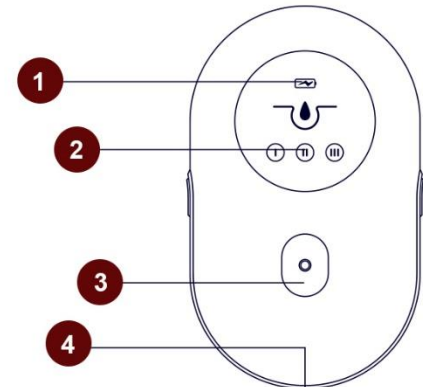

(1) Indicateur de charge	(2) Indicateur de vitesse
(3) Touche ON/Off	(4) Chargeur USB

Remarque : Touche on/off - Appuyez sur la clé pour activer, puis appuyez sur pour choisir l'équipement différent. S'accrocher à l'arrêt

## DERMABRASION ET EXFOLIATION

1. Peau du visage propre et sèche.
2. Remplacer la ventouse de travail par la microcristalline ou le grand trou circulaire :

A Placez la tête d'aspiration de travail dans la région mandibulaire et déplacez-vous du bas vers le haut.

B. Placez les têtes d'aspiration de travail dans la zone de la joue et déplacez-vous de l'intérieur vers l'extérieur.

C. Placez la tête d'aspiration de travail dans la zone du front et déplacez-vous du milieu aux deux côtés.

D. Placez la tête d'aspiration de travail dans la zone T et déplacez-la de bas en haut.


## PORES ET SALETÉ PROPRES

1. Peau du visage propre et sèche :
2. Choisissez et appliquez la pointe désirée d'aspiration.
3. Pour l'enlèvement des points noirs et de l'acné, glissez lentement dans une seule direction horizontale.
4. Ne pas sucer au même endroit pendant plus de 3 sec.

## RÉDUIRE LES RIDULES

1. Nettoyer et sécher la peau faciale.
2. Remplacer la tête d'aspiration elliptique.
3. Placez la tête d'aspiration de travail aux coins de l'œil, nez, lèvres, etc. et montez rapidement. Tirez et tirez à plusieurs reprises. Agir sur la couche sous-jacente de la peau. Augmenter l'élasticité de la peau, réveiller la vitalité. Prévenir les rides.

## INTRODUCTION DE LA VENTOUSE DE TRAVAIL

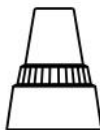

### Petit trou rond de travail ventouse

Petite aspiration, utilisée pour sucer les points noirs. Peau fine tendre et sensible. Si l'aspiration n'est pas trop forte, utilisez une petite tête d'aspiration.



### Ventouse de travail de trou rond moyen

Aspiration élevée. Utilisée pour sucer les points noirs, acné. Ceux qui ont une graisse excessive, ne l'utilisent pas au même endroit pendant une longue période.



### Grand trou rond de travail ventouse

Aspiration élevée, utilisée pour sucer la tête noire, le visage serré en V. Lorsque vous fumez des points noirs pour revenir lentement sur la peau, ne pas passer trop de temps au même endroit. Utiliser en partie; lors du moulage v-face, utiliser pull-up de bas en haut. Manœuvre, se déplacer lentement du menton vers le haut.



### Ventouse de travail de trou elliptique

Il est principalement utilisé pour enlever les ridules. Il doit être rapidement retiré après avoir absorbé la peau. Répète plusieurs fois, peut jouer la circulation sanguine de la peau de promotion, augmente l'élasticité de la peau.



### Ventouse de travail de microcristalline

Les cristaux fins peuvent enlever doucement la cutine vieillissante et rendre la peau tendre. Délicat et glissant.

## ATTENTION

- Ce produit n'a pas de fonction imperméable à l'eau. S'il vous plaît
- essuyer l'eau ou d'autres liquides sur vos mains avant utilisation. Sécher pour empêcher l'eau ou d'autres liquides d'entrer dans le fuselage. endommageant ainsi le fuselage.
- N'utilisez pas de plâtre abrasif ou d'autres produits cutin avant et après utilisation.
- La fonction de dermabrasion et d'exfoliation. Il est recommandé d'utiliser la peau sèche une fois par semaine. huileux ou huilés. La peau neutre peut être utilisée deux fois par semaine.
- Pas plus de 5 minutes pour chaque utilisation. Cela dépend de l'état de la peau.
- S'il vous plaît ne pas appuyer sur la tête d'aspiration de travail dur sur votre peau, parce que l'instrument va produire. Forte force de traction.
- Ne continuez pas à utiliser au même endroit. sinon, il peut causer des rougeurs de la peau, Violet. Si cela se produit, veuillez suspendre l'utilisation.
- Après l'allaitement, en raison de stimuler la circulation interne de la peau ou des rougeurs de la peau. Il appartient au phénomène normal et s'estompera automatiquement environ 30 minutes après utilisation.
- Ce produit n'est pas adapté pour les sites cosmétiques ou de chirurgie esthétique de la peau; Non suggéré pour les personnes physiques. déficiences sensorielles ou mentales ou manque d'expérience et de connaissances. Utiliser avec prudence pour les enfants: les femmes enceintes et les patients atteints de maladies cardiaques.
- De longues périodes d'aspiration sans mouvement pourraient mener aux érythèmes/hématomes. Utiliser avec soin.

