



EMS-OOG MASSAGER CC-9099 motor

Gebruikershandleiding

Bedankt voor het kopen van dit product.
Lees de instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt.
Bewaar de instructies goed.

PRODUCTINTRODUCTIE

EMS-Eye Massager is een high-end oog schoonheid instrument met EMS Micro Current + Beauty Red Light + Constant Temperature Hot Compress + High Frequency Vibration en andere functies. Langdurig gebruik kan effectief de zwarte oogzakken verwijderen, de oog huidproblemen zoals verzakking verlichten. hoeklijnen. donkere vlekken, enz... herstel effectief de elasticiteit van de huid en stel huidveroudering uit.

Instructies

1. Houd de toets ingedrukt om in/ uit te schakelen. standaard De modus Is release mode.
2. Dubbelklik op de toets om de modus te selecteren op basis van uw behoeften.

A. Ontspanningsmodus: Hoogfrequente trilling+ 42°C Constant temperatuur warm kompres, bevordert de bloedcirculatie van de ogen. verlicht vermoeidheid, verwijdert oogzakken en donkere kringen; versnelt de absorptie van oogcrème en andere huidverzorgingsproducten.

B. De Wijze van de schoonheid: Hoge frequentietrilling+ Het rode licht van de schoonheid, 620nm schoonheid rood licht voor ruwe en donkere huid, kan microcirculatie gladmaken, huidenergie verjongen, en effectief sproeten en fijne lijnen vervagen.

C. EMS Aanhaalmodus, EMS+ Rood lampje. EMS direct naar de dermis door middel van microstroom simulatiecel bio-elektriciteit om de collageenproductie te bevorderen, lymfeontgiftiging te bevorderen. de huid strakker te maken. de huid vol en strak te maken. en effectief de oog huid los en hangend te verlichten.

3. Klik op de toets om de intensiteitsuitrusting te selecteren. Er zijn in totaal 3 versnellingen.

4. Breng ongeveer 2 uur in rekening om volledig op te laden bij gebruik voor de eerste keer. Bij het opladen knippert het pictogram van het aan/uit-display; wanneer de stroom laag is, knippert het aan/uit-pictogram 5 keer. en dan wordt de stroom uitgeschakeld; wanneer de stroom vol is, blijft het aan/uit-displaypictogram aan.


Ems

EMS, werkt op de spieren van onderhuids weefsel. Door celbio-elektriciteit te simuleren met microstroom. gezichtsspieren worden gesneden om meer ATP te produceren (ATP is de energie die nodig is voor collageensynthese). Om collageen te verhogen dat nodig is voor collageensynthese). om collageen te verhogen. verstrakken de huid en bevorderen lymfatische ontgiftiging.

HET RODE LICHT VAN DE SCHOONHEID

Schoonheid rood licht wordt bioactief licht genoemd. Het zet lichte energie om in energie in paling Is. versnelt de groeiprocescirculatie van paling I. stimuleert vezelcellen om collageen.so te produceren om de elasticiteit van de huid te verhogen. verbeteren van de vergeling en dofheid van de huid en brengen onverwachte effecten op het herstellen van de verouderende huid. acne huid. spot huid. gerimpelde huid. allergische symptomen, zonnebrandhuid. En zal geen schade en ongemak veroorzaken op de huid.

FUNCTIES

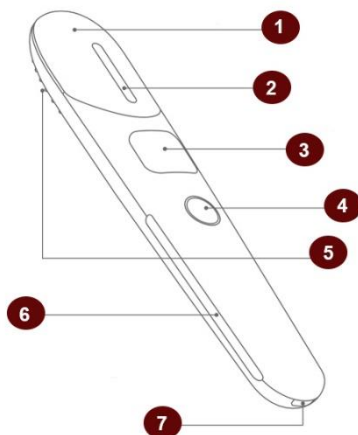

(1) Metalen werkkop	(2) Schoonheid Rood Licht
(3) Weergave	(4) Sleutel
(5) Massage Strip	(6) EMS Geleiding Decoratie
(7) Opladerpoort	

EMS GELEIDING DECORATIE

(Het is noodzakelijk dat de huid van de hand contact opneemt met de geleidende strip, zodat de metalen werkkop EMS-microstroom kan genereren)

WERKINSTRUCTIES

Dubbelklik op de sleutelconversiemodus en klik op de toets om het sterke hoofdwieltje te converteren:

♥ RELAXATION MODE	(O) + ☀
	Vibrate + Hot
♥ BEAUTY MODE	(O) + ☀
	Vibrate + Light
♥ EMS COMPACT MODE	⚡ + ☀
	EMS + Light

De EMS-intensiteit is onderverdeeld in 3 niveaus. Selecteer de juiste intensiteit op basis van uw huidgevoeligheid om ongemak te voorkomen. Het wordt aanbevolen om te beginnen met een lage versnelling:

	1lichtdisplay, EMS-intensiteit is "Zwak"
	2lichtschermen, EMS intensiteit is "Medium"
	3lichtweergave, EMS intensiteit is "Sterk"

Specificaties

Naam	EMS-Oog massager
Rode Band	620±20nm
Verwarmingstemperatuur	42 graden Celsius±2 graden Celsius
EMS-stroom	Tot 30µA
De Spanning van de snelheid	3.7V
Verwarmingsvermogen	1,9 W
Huidige beoordelen	450mA
Batterijcapaciteit	500mAh
Werkijd	Meer dan 90 minuten
Oplaadtijd	Ongeveer 2 uur
Productgrootte	160 x 30 x 19,5 mm
Executive Standaard	NL4706.I-2005 GB4706.I5-2008

REINIGINGSMETHODE

Nadat het product is gebruikt, veeg het af met een doek in de uit-staat en zet het op een koele en droge plaats. Houd er rekening mee dat dit product niet waterdicht is en niet met water mag worden gespoeld.

Aandacht

1. Dit product heeft geen waterdichte functie. Doe het alsjeblieft niet in het water.
2. Het product heeft het verwarmen functie, ongeveer 42°C. Mensen die niet gevoelig zijn voor hitte moeten het zorgvuldig gebruiken.
3. Wanneer de ogen zijn geverfd foundation of make-up, verwijder dan de make-up voordat u voorzichtig bent.
4. als u tijdens het gebruik ongemak of huidafwijkingen voelt, stop onmiddellijk met het gebruik en raadpleeg uw arts.
5. Mensen die dit product niet mogen gebruiken:

A. De overeenkomstige delen met metaal in het lichaam als gevolg van behandeling en andere redenen:

B. Patiënten met een hartaandoening (vooral patiënten met pacemakers)

C. Capillaire expansie veroorzaakt door hormoon of ziekte.

D. Huidontsteking, Pruritus, roodheid en zwelling veroorzaakt door allergie of andere redenen.

E. Het wordt niet aanbevolen om dit product te gebruiken voor de onderdelen met microafwerking, prothese, neusvergroting, Injectie, ingebedde gouden draad, Enz.

6. Laat kinderen dit product niet aanraken of gebruiken om gevaar te voorkomen.



