



EMS-EYE MASSAGER CC-9099 Motor

Bedienungsanleitung

Vielen Dank für den Kauf dieses Produkts.
Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.
Bitte halten Sie die Anweisungen ordnungsgemäß ein.

PRODUKTEINFÜHRUNG

EMS-Eye Massager ist ein High-End-Augen-Schönheitsinstrument mit EMS Micro Current+ Beauty Red Light+ Constant Temperature Hot Compress+ High Frequency Vibration und anderen Funktionen. Langfristige Verwendung kann effektiv die schwarzen Augentaschen entfernen, lindern die Augenhaut Probleme wie Absacken. Ecklinien. dunkle Flecken usw. die Elastizität der Haut effektiv wiederherzustellen und die Hautalterung zu verzögern.

Anweisungen

1. Halten Sie die Taste zum Ein-/Ausschalten und Standard Sein Modus ist der Freigabemodus.
2. Doppelklicken Sie auf die Taste, um den Modus nach Ihren Bedürfnissen auszuwählen.

A. Entspannungsmodus: Hochfrequenz-Vibration+ 42°C Konstante Temperatur heiße Komresse, fördern die Durchblutung der Augen. Müdigkeit zu lindern, Augentaschen und dunkle Kreise zu entfernen; die Absorption von Augencreme und anderen Hautpflegeprodukten zu beschleunigen.

B. Beauty-Modus: Hochfrequente Vibration + Schönheit rotes Licht, 620nm Schönheit rotes Licht für raue und dunkle Haut, kann Mikrozirkulation glätten, hautenergie verjüngen und effektiv Sommersprossen und feine Linien verblassen.

C. EMS Anzugsmodus, EMS+ Rotes Licht. EMS direkt an die Dermis durch Mikrostrom-Simulationszell-Bioelektrizität zur Förderung der Kollagenproduktion, Förderung der Lymphentgiftung. Straffung der Haut. machen die Haut voll und straff. und entlasten effektiv die Augenhaut locker und herabhängend.

3. Klicken Sie auf die Taste, um das Intensitätsgetriebe auszuwählen. Es gibt insgesamt 3 Gänge.

4. Bitte berechnen Sie für ca. 2 Stunden bis zur vollen Ladung, wenn Sie zum ersten Mal verwenden. Beim Laden blinkt das Power-Display-Symbol ; wenn die Stromversorgung niedrig ist, blinkt das Power-Display-Symbol 5 Mal. und dann wird die Stromversorgung ausgeschaltet : Wenn die Stromversorgung voll ist, bleibt das Power-Display-Symbol eingeschaltet.


Ems

EMS, wirkt auf die Muskeln des subkutanen Gewebes. Durch Simulation von Zellbioelektrizität mit Mikrostrom. Gesichtsmuskeln werden geschnitten, um mehr ATP zu produzieren (ATP ist die Energie, die für die Kollagensynthese benötigt wird). Um Kollagen für die Kollagensynthese zu erhöhen).
, um Kollagen zu erhöhen. die Haut straffen und die lymphatische Entgiftung fördern.

SCHÖNHEIT ROTES LICHT

Schönheit rotes Licht wird bioaktives Licht genannt. Es wandelt Lichtenergie in Energie in Aal Is. beschleunigt aal I Wachstumsprozesszirkulation. stimuliert Faserzellen, um collagen.so zu produzieren, um die Elastizität der Haut zu erhöhen. Verbesserung der Vergilbung und Stumpfheit der Haut und unerwartete Auswirkungen auf die Reparatur der alternden Haut. Akne-Haut. Fleckenhaut. faltige Haut. allergische Symptome, Sonnenbrandhaut. Und verursacht keinen Schaden und Unbehagen auf die Haut.

FUNKTIONEN

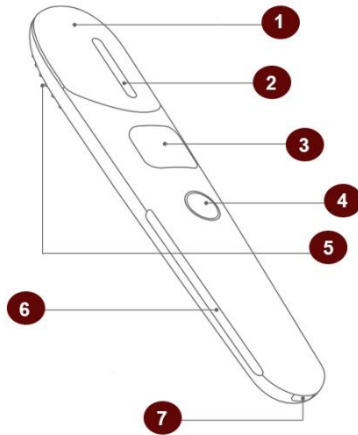

(1) Metall-Arbeitskopf	(2) Schönheit Rotes Licht
(3) Anzeige	(4) Schlüssel
(5) Massage Dot	(6) EMS Leitungsdekoration
(7) Ladegerät-Anschluss	

EMS CONDUCTION DEKORATION

(Es ist notwendig, dass die Haut der Hand mit dem leitfähigen Streifen in Berührung kommt, damit der Metallbearbeitungskopf EMS-Mikrostrom erzeugen kann)

ARBEITSANWEISUNGEN

Doppelklicken Sie auf den Schlüsselkonvertierungsmodus, und klicken Sie auf die Taste, um das starke Hauptgerät zu konvertieren:

♥ RELAXATION MODE	(Vibrate) + Hot
♥ BEAUTY MODE	(Vibrate) + Light
♥ EMS COMPACT MODE	(EMS) + Light

Die EMS-Intensität ist in 3 Stufen unterteilt. Bitte wählen Sie die entsprechende Intensität entsprechend Ihrer Hautempfindlichkeit aus, um Beschwerden zu vermeiden. Es wird empfohlen, mit niedrigem Gang zu beginnen:

	1 Lichtanzeige. EMS-Intensität ist "schwach"
	2 Lichtanzeigen, EMS-Intensität ist "Mittel"
	3 Lichtanzeigen, EMS-Intensität ist "Stark"

Spezifikationen

Namen	EMS-Augenmassage
Red Band	620±20nm
Heiztemperatur	42°C±2°C
EMS Strom	Bis zu 30 A
Rate Spannung	3.7V
Heizleistung	1,9 W
Rate Current	450mA
Batteriekapazität	500mAh
Arbeitszeit	Mehr als 90 Minuten
Ladezeit	Ungefähr 2 Stunden
Produktgröße	160 x 30 x 19,5 mm
Executive Standard	GB4706.I-2005 GB4706.I5-2008

REINIGUNGSMETHODE

Nach der Verwendung des Produkts, mit einem Tuch im Off-Zustand abwischen und an einen kühlen und trockenen Ort stellen. Beachten Sie, dass dieses Produkt nicht wasserdicht ist und nicht mit Wasser gespült werden sollte.

Aufmerksamkeit

1. Dieses Produkt hat keine wasserdichte Funktion. bitte nicht ins Wasser geben.
2. Das Produkt hat Heizungsfunktion, ca. 42°C. Menschen, die nicht hitzeempfindlich sind, sollten es sorgfältig verwenden.
3. Wenn die Augen Fundament oder Make-up gemalt sind, entfernen Sie bitte das Make-up, bevor Sie vorsichtig sind.
4. wenn Sie Beschwerden oder Hautanomalien während der Anwendung fühlen. Bitte beenden Sie die Anwendung sofort und konsultieren Sie Ihren Arzt.
5. Personen, die dieses Produkt nicht verwenden dürfen:

A. Die entsprechenden Teile mit Metall im Körper aufgrund der Behandlung und aus anderen Gründen:

B. Patienten mit Herzerkrankungen (insbesondere Patienten mit Herzschrittmachern)

C. Kapillarexpansion durch Hormon oder Krankheit verursacht.

D. Hautentzündung. Pruritus. Rötung und Schwellung durch Allergie oder andere Gründe verursacht.

E. Es wird nicht empfohlen, dieses Produkt für die Teile mit Mikroveredelung, Prothese, Nasenvergrößerung zu verwenden. Injektion. eingebetteten Goldfaden. Etc.

6. Lassen Sie Kinder dieses Produkt nicht berühren oder verwenden, um Gefahren zu vermeiden.

		 <p>RoHS FCC CE Recycle WEEE</p>
--	--	---