




Massageur facial magnétique de micro vibration avec LED **CC-9102**

Manuel



PIÈCES:

- | |
|-----------------|
| 1. La poignée |
| 2. Piles bouton |
| 3. La base |

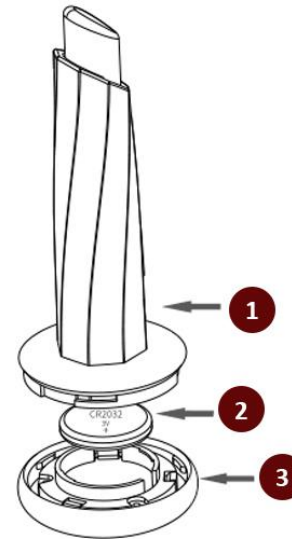

INSTRUCTION D'ÉTAPE POUR LA BATTERIE :

Ce produit utilise la batterie du bouton CR2032

1. Tournez la base dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la séparer de la base de poignée.
2. Retirez la batterie et insérez un bouton selon le signe ascendant de la batterie +number CR2032.
3. Tournez l'horloge de base et attachez-la dans la direction de la fixation du siège de poignée.

Conseils chauds: *Le produit n'a pas de commutateur, il peut être ouvert d'une seule touche, et le muscle vibre légèrement.*

INTRODUCTION:

L'instrument d'importation de lumière rouge et bleue, qui combine la boucle étroite du corps humain, se combine avec le principe de boucle fermée du corps humain, Il libère l'énergie interne en touchant la force magnétique, et masse les yeux et l'essence faciale dans la peau pour améliorer l'effet de soin de la peau, soulever et serrer efficacement la peau, et a favorisé la synthèse de la structure cellulaire et des protéines dans diverses couches de la peau. Massage léger rouge et bleu peut jouer le rôle de l'anti-inflammation et la stérilisation, promouvoir la circulation sanguine, l'absorption de la nutrition, rajeunissement des couleurs.

UTILISATION/ MÉTHODE:

1. Appliquer uniformément de la crème sur le visage
2. Sans le bouton d'interrupteur, l'importateur peut commencer par tenir l'anneau métallique.
3. Placez la partie supérieure sur le visage et l'instrument commence à vibrer.

SPÉCIFICATION:

Nom: Magnetic Micro Vibration Facial Massager with LED
Modèle de produit: CC-9102
Puissance de travail: 0.3W
Fréquence des vibrations: 10000RPM
Taille: 39x11x98mm
Matériaux: ABS+PC
Norme d'exécution: GB4706.15-2008



--	--	--