

Entretien

1. Essuyez la surface de l'équipement avec une serviette légèrement humide et séchez-la avec un chiffon doux.
2. Lorsque vous stockez ou voyagez pendant une longue période, veuillez séparer la batterie de l'équipement et la mettre dans la boîte d'emballage d'origine de l'équipement.

Avertissement

1. Ne vous immergez pas dans l'eau, tenez-vous à l'écart des sources de liquide et de chaleur en même temps et gardez le trou de refroidissement du moteur exempt de poussière et d'articles divers.
2. Ne démontez pas les vis sans autorisation.
3. Arrêtez l'équipement pendant une demi-heure pour chaque heure de fonctionnement.
4. Débranchez le chargeur de la batterie après la charge ou avant utilisation, et ne l'utilisez pas pendant la charge.
5. L'utilisation de cet équipement est interdite sans consulter un médecin pour la partie blessée du corps.

Démenti

Avant d'utiliser l'équipement, veuillez lire attentivement les instructions d'utilisation, puis utiliser cet équipement correctement conformément aux instructions. La société n'assumera aucune obligation légale pour les blessures et les pertes causées par une mauvaise utilisation de l'équipement conformément aux instructions. Ne pas utiliser à grande vitesse et à haute pression ou interdire l'utilisation d'équipement sans l'approbation du médecin dans l'une des circonstances suivantes:

Grossesse, diabète, neuropathie ou lésions rétinienne, port d'un stimulateur cardiaque, chirurgie récente, épilepsie ou migraine, hernie discale, lyse ou spondylarthrite, remplacement articulaire récent ou dispositif intra-utérin ou problèmes de santé physique, adultes et enfants faibles (doivent être accompagnés d'adultes en bonne santé). Ces contradictions ne signifient pas que vous ne pouvez pas utiliser cet équipement. Nous vous suggérons de consulter votre médecin avant de l'utiliser avec sa permission. Nous étudions l'impact de l'équipement sur des maladies médicales spécifiques, ce qui peut conduire à ce que la description ci-dessus ne soit pas complète et détaillée, mais toutes les personnes souffrant des symptômes ci-dessus doivent être complétées avec les conseils et accompagnées par les médecins, les experts ou les physiothérapeutes.






Manuel

Appareil de physiothérapie pour myofascium

CC - 9111

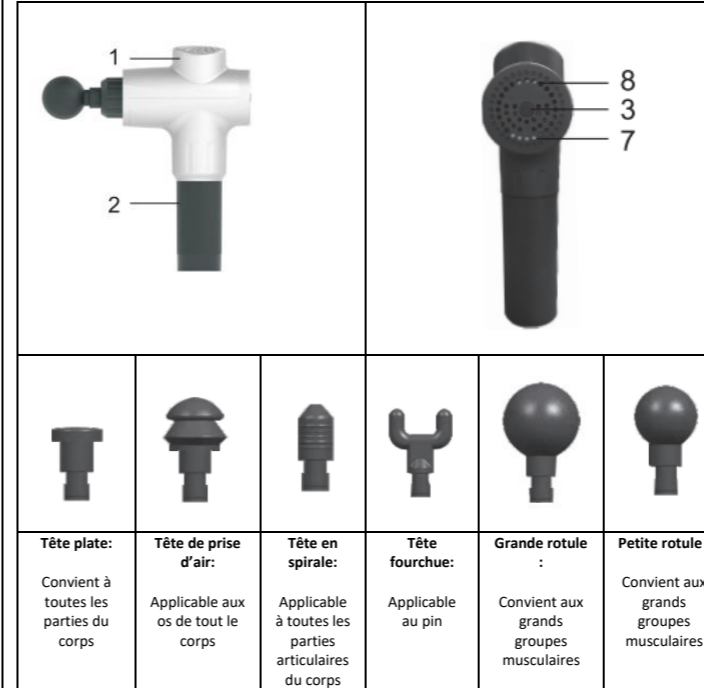

1. Haute fréquence, haut silence, moteur à grande vitesse
2. Pile
3. Bouton de démarrage et de contrôle de la vitesse pour moteur
4. Interrupteur de batterie +
5. Prise de charge
6. 6 types de têtes de massage;
7. Voyant d'électricité (lorsque quatre voyants verts et un voyant rouge sont de gauche, cela indique une batterie suffisante.
 - a. Ensuite, au fur et à mesure que le temps d'utilisation s'allonge, les quatre voyants verts s'éteignent de gauche à droite, et finalement seulement le voyant rouge est allumé, indiquant que l'électricité est épuisée et doit être chargée).
8. Voyant d'engrenage (le premier voyant bleu de droite s'allume en tant que premier rapport (fréquence d'impulsion: 4 1800 tr / min), le deuxième rapport lorsque deux voyants bleus s'allument (fréquence d'impulsion: 2400 tr / min) et le troisième lorsque trois lumières s'allument (fréquence d'impulsion: 3200 tr / min: 5 minutes)

Mode d'emploi

1. Lorsque l'interrupteur de batterie 6 est mis en position « ON », l'indicateur de mise sous tension de la batterie et l'indicateur d'alimentation 9 seront allumés, avec 4 voyants verts et 1 voyant rouge représentant la consommation d'énergie de forte à faible de gauche à droite, et lorsque seul le voyant rouge est allumé, cela signifie que la consommation d'énergie doit être chargée.
2. Selon les différents besoins des pièces de massage, des têtes spécifiques sont sélectionnées pour être insérées dans le trou rond devant le pistolet à fascia.

3. Lorsque le bouton de démarrage du moteur 4 est enfoncé, le moteur commence à tourner; Le premier voyant vert au-dessus du bouton du moteur s'allume en haut représente le rapport « 1 »; Appuyez à nouveau sur le bouton de démarrage du moteur, les deux voyants verts s'allument sur le rapport 2; Appuyez trois fois sur le bouton de démarrage du moteur et les trois voyants verts s'allument pour représenter le rapport 3 »; Appuyez quatre fois sur le bouton de démarrage du moteur, puis le moteur cesse de tourner; Appuyez à nouveau sur le bouton pour démarrer le rapport « 1 ». Ce qui précède est le flux du cycle de base.
4. Éteignez l'interrupteur de la batterie après le massage.
5. Afin de protéger l'équipement, la connexion arrêtera automatiquement la protection après 10 minutes de fonctionnement continu. S'il est toujours nécessaire, veuillez le réactiver.

Instructions sur la batterie

1. Une fois l'alimentation épuisée, la batterie doit être chargée pendant 2,5 à 3 heures pour être complètement chargée, et la durée de vie de la batterie dépend du réglage du rapport. Lorsque la batterie est chargée, le voyant d'alimentation de la batterie 5 s'allume, ce qui signifie que la charge est normale. Dans le même temps, il est interdit de démarrer le moteur lors de la charge. Pour votre sécurité, la clé du moteur ne peut pas être démarrée lors du chargement de la batterie.

Consignes de sécurité

Pour réduire les chocs électriques, le feu et les blessures corporelles, ce produit doit être utilisé conformément aux instructions suivantes.

1. Seulement pour les adultes.
2. Cet équipement ne peut pas masser directement la surface de la peau, afin de ne pas endommager la peau. La partie massage ou l'équipement doit être recouvert de vêtements secs et propres, et l'équipement doit être doucement pressé et déplacé pendant l'utilisation. Le temps de massage pour la même partie ne doit pas dépasser 60 secondes.
3. En l'absence de douleur, de tumeur et d'inconfort, seules les parties des tissus mous du corps peuvent être utilisées avec une vitesse et une pression élevées, et la tête et toutes les parties osseuses du corps ne peuvent pas être utilisées avec une vitesse et une pression élevées.
4. Selon les besoins de massage des différentes parties, veuillez sélectionner la tête de massage appropriée.
5. Une vitesse élevée fréquente et une pression élevée sur la même pièce provoqueront des ecchymoses, accompagnées de douleur et d'inconfort, qui doivent être arrêtées immédiatement.
6. Veuillez garder vos doigts et tous vos cheveux loin de la tige télescopique de l'équipement et du trou de refroidissement du moteur à l'arrière pour éviter le pincement.
7. Ne mettez aucun objet dans les trous de dissipation de chaleur du moteur.
8. Ne débordez pas l'équipement dans l'eau. Aucune eau n'est autorisée à pénétrer dans l'équipement à partir du trou de dissipation de chaleur du moteur.
9. Ne jetez pas ou n'abusez pas de cet équipement.
10. Seul le chargeur fourni par l'usine d'origine peut être utilisé pour la charge.
11. Veuillez vérifier attentivement l'équipement et la batterie avant chaque utilisation.
12. N'apportez aucune modification à l'équipement sans autorisation.
13. Ne faites pas fonctionner l'équipement et ne chargez pas l'équipement sans surveillance.

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|